

# 検査用陰圧ブース「MC-BOX」



患者を陰圧隔離したまま、  
「ワンマン」で検体採取やワクチン接種を行えます。



ワクチン接種





PCR検査




発熱外来

# 患者を陰圧隔離するので、 小スペースでも運用ができます。

レブセル独自のパスボックスは、ブース内の上部が開くので、  
陰圧隔離したまま、ワンマンで出し入れができます。  
ワクチン接種や検体採取を1人で安全に行うことができます。

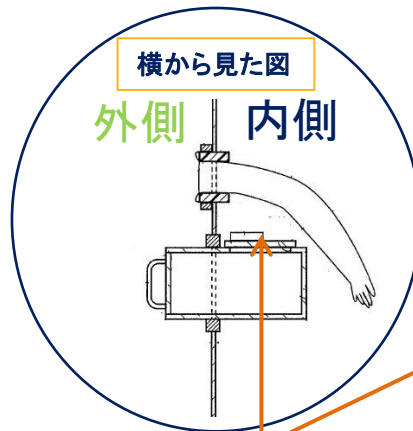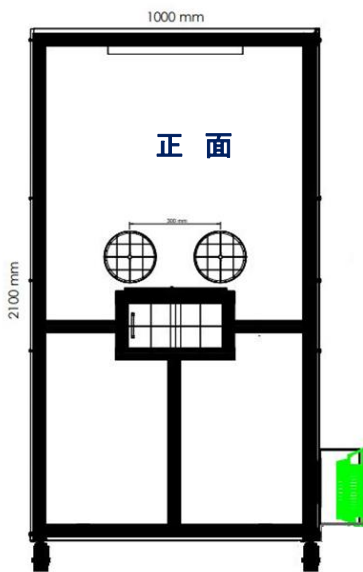

ブース内のパスボックスは、  
天面部に設けられた蓋が開閉で  
きるので、外側の腕部挿入口か  
ら挿入した手で、検体等の出し入  
れができます。 \*特許取得済

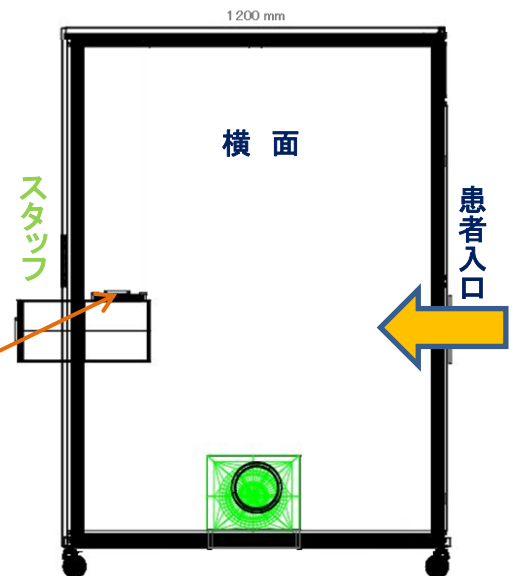

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 製品名    | 検査用陰圧ブース「MC-BOX」        |
| テントサイズ | W1000mm×D1200mm×H2100mm |
| 集塵効率   | 0.3 μmの粒子にて99.99%以上     |
| フィルター  | HEPAフィルター               |
| 処理風量   | 3m <sup>3</sup> /分      |
| 換気回数   | 70回以上/時間*ブース内           |
| 圧差     | 2.5Pa以上*テント内外           |
| 電源     | AC100V 50/60Hz          |
| 消費電力   | 40W/40W                 |

販売店