

検査用陰圧ブース「MC-BOX」



患者を陰圧隔離したまま、
「ワンマン」で検体採取やワクチン接種を行えます。



ワクチン接種





PCR検査




発熱外来

患者を陰圧隔離するので、 小スペースでも運用ができます。

レブセル独自のパスボックスは、ブース内の上部が開くので、
陰圧隔離したまま、**ワンマン**で出し入れができます。
ワクチン接種や検体採取を1人で安全に行うことができます。

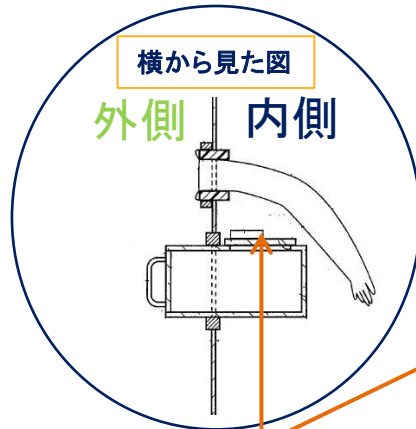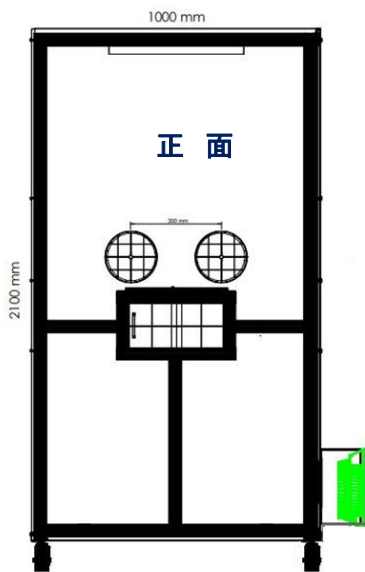

ブース内のパスボックスは、
天面部に設けられた蓋が開閉で
けるので、外側の腕部挿入口か
ら挿入した手で、検体等の出し入
れができます。 *特許取得済

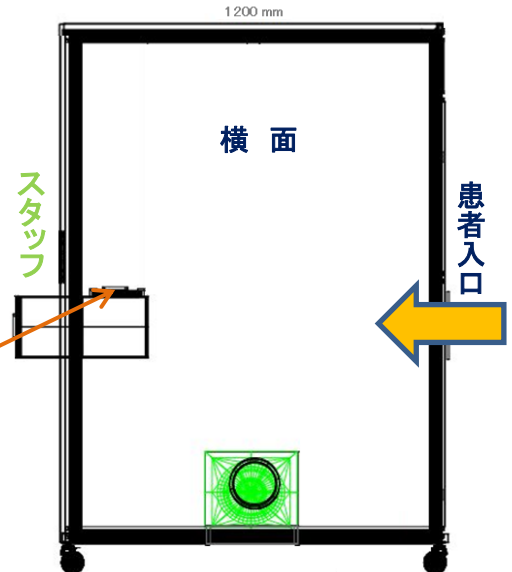

製品名	検査用陰圧ブース「MC-BOX」
ブースサイズ	W1000mm×D1200mm×H1950mm
集塵効率	0.3 μmの粒子にて99.99%以上
フィルター	HEPAフィルター
処理風量	3m ³ /分
換気回数	70回以上/時間*ブース内
圧差	2.5Pa以上*ブース内外
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	40W/40W

販売店

*製品のサイズ、仕様等は予告無く変更となる場合があります。